



Comment mettre hors tension le Philips Respironics V60

Cette technique indique comment mettre hors tension le respirateur Philips Respironics V60.

Rédigé par: knipwim




Étape 1 — Éteindre le respirateur



- Pressez et relâchez la touche **ON/Shutdown**, ceci ouvrira la page d'extinction sur l'écran..
 - Sélectionnez **extinction du respirateur** ("Ventilator Shtudown"), qui aura pour effet d'éteindre l'appareil.
- ⚠ Une extinction incorrecte peut causer l'appareil du message **L'alimentation a été rétablie** ("Power has been restored") la prochaine fois que le respirateur sera rallumé.

Étape 2 — Déconnecter du courant

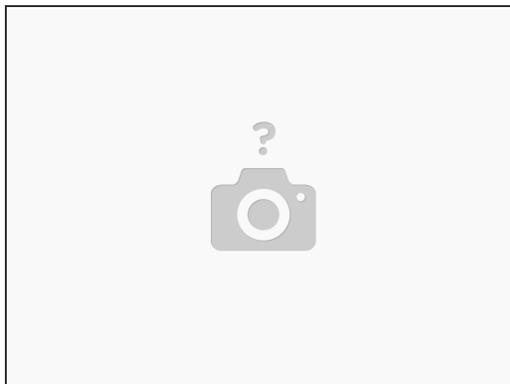

- Déconnectez le respirateur artificiel du courant électrique.